

Flexible konvexe Stomaversorgung für Ileo-, Kolo- und Urostomie!

eakin® 
Wunde · Fistel · Stoma

B. Mehr Diskretion

Gase können durch den wasserdichten geruchshemmenden Filter entweichen.

A. Zusätzliche Sicherheit

Die große Filterkammer ist mit einer Folienschicht vom Innenraum des Beutels getrennt, in den die Ausscheidungen gelangen.

J. Stabilisation

Neue Schweißnahttechnik auf Fensterhöhe stabilisiert das Vlies, damit bei gefülltem Beutel das Sichtfenster nicht aufklafft.

I. Kein Rückstau

Stomaausscheidungen gelangen auf normalem Weg in den Beutel und sammeln sich dort an

H. Keine scharfen Kanten

durch Vliesbeschichtung auf dem Beutelauslass.

G. Stabilität

Zusätzliche Folie auf der Innenseite des Vlies sorgt für Stabilität beim Hochfalten des Auslasses.

C. Neues Filterkonzept

Der weiße Vorfilter ermöglicht Gasen, in die Filterkammer zu strömen und verhindert, dass Ausscheidungen eindringen können.

D. Doppelte Funktion


Gase ziehen ungehindert durch den weißen Vorfilter in die große Filterkammer. Der Vorfilter fungiert als Barriere gegen Ausscheidungen.

E. Kein Beutelaufblähen

Gase, die aus dem Stoma kommen, belegen den Beutel und wandern in Richtung des Filterausgangs

F. Mehr Komfort

Klettverschluss, an dem das verschlossene Beutelende hochgeklappt und fixiert werden kann

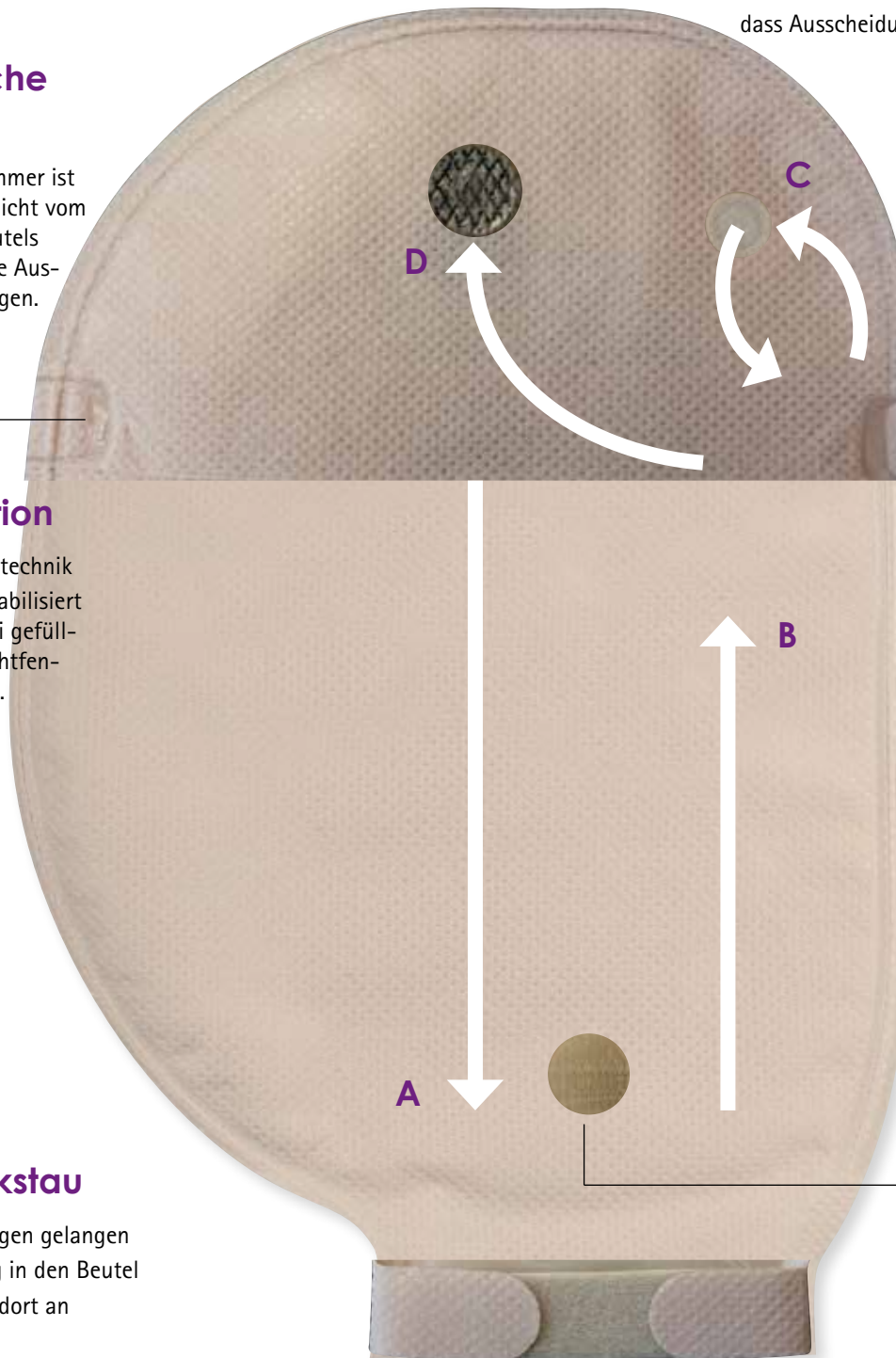

Fragen, Muster, Bestellungen:

0800-22 440 22 (gebührenfrei)

Eakin GmbH · FeringasträÙe 6 · 85774 München-Unterröhring

Tel. 089 - 99 216 256 · Fax 089 - 99 216 200 · info@eakin.de · www.eakin.de