

**Für Erwachsene:**  
**Flexible Konvexität,  
die sich anpasst**




# Neu von Eakin®: Konvexe Stomabeutel für Ileo-, Kolo- und Urostomie

Diese konvexen Stomabeutel haben eine besonders anpassbare Hautschutzplatte, ideal für Stomata auf oder unter Hautniveau.

### Hinweis:

Konvexe Stomabeutel von Eakin® gibt es auch für Kinder!

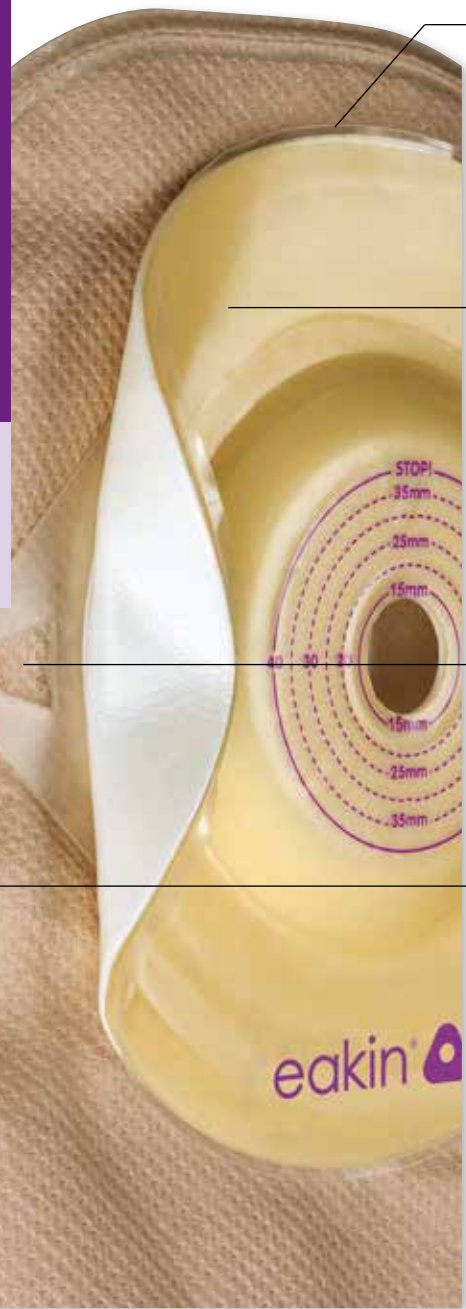

Das geteilte Vlies auf der Vorderseite erlaubt es, das Stoma zu sehen und den Beutel einfach und exakt anzubringen.

### Flexible Konvexität

Die besonders flexible Form reduziert das Risiko von Druckstellen. Ermöglicht die Anbringung z.B. in nachgebenden Bauchfalten und bei überhängenden Bauchdecken.

### Hypoallergener Hautschutz

Der bewährte Eakin Cohesive® Hautschutz in angepasster Formulierung sorgt für Sicherheit und komfortablen Sitz.

Optional kann an den Beuteln ein Gürtel befestigt werden.

Weiche Vliesumhüllung für mehr Tragekomfort.



### Eakin® Ausstreifbeutel konvex

mit feuchtigkeitsdichtem Filter, beidseitiger weicher Vliesumhüllung mit Sichtfenster, klammerlosem Verschluss mit Komfortflasche und Gürtelhalterung.


Die Komfortflasche vereinfacht die Handhabung:



1 Das verstärkte Beutelende an den Kanten zusammendrücken.




2 An der Komfortflasche ziehen und halten – bildet eine große Öffnung, erleichtert Entleerung und Reinigung.

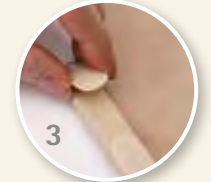

3 Nach dem Entleeren/der Reinigung einfach Beutelende wieder hochfalten und mit Klettverschluss fixieren.

### Eakin® Kolostomiebeutel konvex

mit feuchtigkeitsdichtem Filter, beidseitiger weicher Vliesumhüllung mit Sichtfenster und Gürtelhalterung.

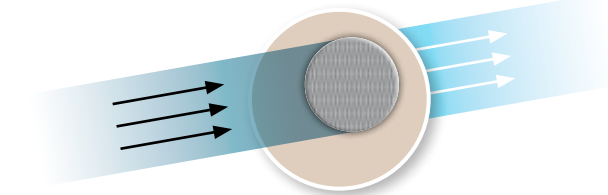

### Eakin® Urostomiebeutel konvex

mit Rücklaufsperr, beidseitiger weicher Vliesumhüllung mit Sichtfenster, Ablassventil mit Kontaktschutz und Gürtelhalterung.

Kontaktschutz für besonders angenehmen Tragekomfort:



Das weiche Vlies verläuft auf der körperzugewandten Seite bis zum Ende des Ventils.

Das Ablassventil ist sehr weich. Durch Zusammendrücken kann so der Urinfluss beim Entleeren kontrolliert werden. Das Lumen ist groß genug, damit Urin plus Schleimbeimengungen und Sedimente ablaufen können.

Bein- oder Bettbeutel können angeschlossen werden.

### Tipp:

Eakin Cohesive® alkoholfreie Paste ist ideal für Stomabetreffene mit konvexer Versorgung.

Die Paste bleibt flexibel und trocknet nicht aus, somit bietet sie optimale Abdichtung und Sicherheit ohne unangenehmen zusätzlichen Druck zu verursachen.



	INHALT	PZN	ART.-NR.	HMV
Ausstreifbeutel konvex 560 ml (12–40mm), ausschneidbar	10	01118844	839500	29.26.02.3035
Ausstreifbeutel konvex 560 ml (20mm), vorgestanzt	10	01119499	839501	29.26.02.3035
Ausstreifbeutel konvex 560 ml (25mm), vorgestanzt	10	01119944	839503	29.26.02.3035
Ausstreifbeutel konvex 560 ml (30mm), vorgestanzt	10	01123420	839505	29.26.02.3035
Kolostomiebeutel konvex 460 ml (12–40mm), ausschneidbar	10	01118732	839530	29.26.01.3030
Kolostomiebeutel konvex 460 ml (20mm), vorgestanzt	10	01118784	839531	29.26.01.3030
Kolostomiebeutel konvex 460 ml (25mm), vorgestanzt	10	01118809	839533	29.26.01.3030
Kolostomiebeutel konvex 460 ml (30mm), vorgestanzt	10	01118815	839535	29.26.01.3030
Urostomiebeutel konvex 550 ml (12–40mm), ausschneidbar	10	01125198	839540	29.26.03.3020
Urostomiebeutel konvex 550 ml (20mm), vorgestanzt	10	01128469	839541	29.26.03.3020
Urostomiebeutel konvex 550 ml (25mm), vorgestanzt	10	01128481	839543	29.26.03.3020
Urostomiebeutel konvex 550 ml (30mm), vorgestanzt	10	01128498	839545	29.26.03.3020
Eakin® Gürtel für konvexe Beutel, stufenlos verstellbar, 50–160cm	1	05494426	839520	29.26.11.0024

# Zubehör von Eakin® erleichtert das Leben mit dem Stoma

**eakin®** ™  
Weil Hautschutz wichtig ist



## Eakin Cohesive® Paste: Abdichtung und Hautschutz ohne Brennen!

Die Eakin Cohesive® Hautschutzpaste ohne Alkohol brennt nicht beim Auftragen. Mehr Komfort und Sicherheit speziell für empfindliche oder schon gereizte Haut.

### Eakin Cohesive® Hautschutzpaste 60 g

Packungsinhalt: 1

Artikel-Nr.: 839010

PZN: 05493131

### Eakin Cohesive® Hautschutzpaste 20 g

Packungsinhalt: 1

Artikel-Nr.: SP839010

PZN: 06575256



## Eakin Release™ Pflasterentferner

Hautschonende Entfernung  
von stark haftenden  
Versorgungen und Klebe-  
rückständen

Jetzt neu auch als Tücher!

### Eakin Release™ Spray 50 ml

Packungsinhalt: 1

Artikel-Nr.: 839023

PZN: 07532102

### Eakin Release™ Tücher

Packungsinhalt: 30

Artikel-Nr.: 839024

PZN: 09709013



## Eakin® Gürtel

Stufenlos verstellbar

50 bis 160 cm

Artikel-Nr.: 839520

PZN: 05494426



## Eakin Protect™ Hautschutztücher

Hautschutztücher, um  
gegen Reizungen, Nässe  
und hautschädigende Aus-  
scheidungen zu schützen

Packungsinhalt: 30

Artikel-Nr.: 839025

PZN: 09709036



## Eakin Perform™ Flüssigkeitsabsorber

Bindet bis zu 800 ml  
dünnflüssige Ausscheidungen  
im Stomabeutel

Packungsinhalt: 60

Artikel-Nr.: 839020

PZN: 09708999

Alle Informationen dieses Eakin Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation.



Fragen, Muster, Bestellungen:

**0800-22 440 22** (gebührenfrei)

Eakin GmbH · FeringasträÙe 6 · 85774 München-Unterröhrling

Tel. 089 - 99 216 256 · Fax 089 - 99 216 200 · info@eakin.de · www.eakin.de